

UVC-Desinfektionslampen Serie AR 300–1500

Beschreibung

Die UV-Einheiten der AR-Serie sind in verschiedenen Längen erhältlich und bestens geeignet zur Desinfektion von Raumluft und Oberflächen ohne Personenaufenthalt.

Luft, Oberflächen und Arbeitsflächen werden durch Einwirken von UV-C-Licht von Keimen, Viren, Hefen und Schimmelsporen befreit. Werden steckerfertig geliefert.

Anwendungsbereiche

- Labore
- Steril-Werkbänke
- Inkubatoren
- Sicherheitswerkbenke
- Produktionsflächen
- Arbeitsflächen
- Lagerräume

Montage/Wartung

Wand- und Deckenmontage ist möglich (Gerätehalterung ist im Lieferumfang enthalten) Austausch der Strahler erfolgt einfach über eine Schraubfassung.

Eigenschaften

Vorschalt elektronik im Gehäuse wassergeschützt integriert.

Optional


- UV-C-Strahler mit extra Splitterschutz
 - Ständer AR zur Befestigung auf dem Arbeitstisch (Bestellnr. 110.5480)
 - Extra starke Magnete zur Befestigung an metallischen Oberflächen (Bestellnr. 110.5482)
- Achtung! Magnete sind nicht für Edeltahloberflächen geeignet!**



UV-Desinfektionseinheit AR-300-1500




UV-Desinfektionseinheit AR-300-1500 mit Montagehalterung

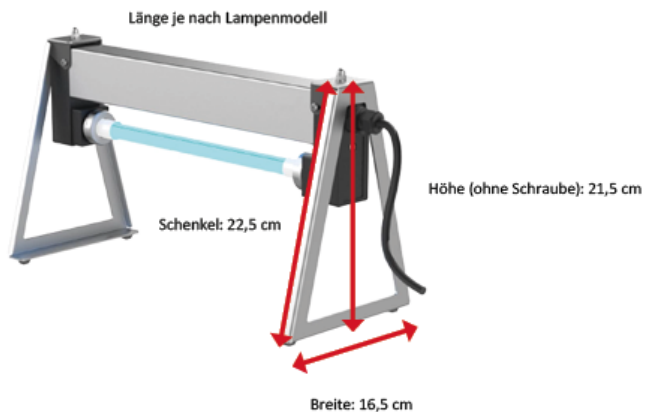

UV-Lampe AR-300 mit optionalem Ständer
Artikelnummer Ständer: 110.5480

UVC-Desinfektionslampen Serie AR 300–1500

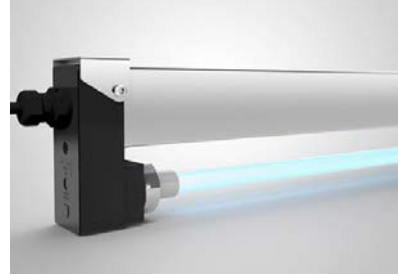

Technische Daten

Modell	AR300	AR400	AR600	AR810	AR1000	AR1200	AR1500
Artikelnr.	110.5499	110.5500	110.5501	110.5502	110.5503	110.5504	110.5505
Abmessung (L x B x H)	390x107x52	490x107x52	700x107x52	900x107x52	1100x107x52	1300x107x52	1600x107x52
Material Gehäuse	Edelstahl V2A/ KS						
Strahler ST1*	1 x high efficiency / 16.000 h						
Leistung	13 W	18 W	29 W	40 W	50 W	61 W	77 W
Spannung	230 V ±10% (50 - 60 Hz)						
Anschluss	Euro-Stecker (Kabel 3 m)						
Gewicht	1,5 kg	2 kg	2,3 kg	3,5 kg	4,2 kg	4,9 kg	6 kg
Schutzklasse	IP54						

*Passende Ersatzlampen erhalten Sie ebenfalls bei LTF Labortechnik, www.labortechnik.com

Montagemöglichkeiten

Das Standard-Montageset mit zwei Halterungen zum Schrauben ist im Lieferumfang enthalten.



Standard-Montageset (inklusive)

Optional

Befestigung mit zwei starken Magneten.
Bestellnr. 110.5482



Achtung!
Nicht für Edelstahl-
oberflächen geeignet!