

FV-2400 Microspin Minizentrifuge/Vortex

Beschreibung

FV-2400 Micro-Spin ist speziell für PCR-Anwendungen und die Genforschung geeignet. Zur Verwendung in mikrobiologischen, biochemischen, klinischen und biotechnologischen Labors entwickelt.

Micro-Spin ermöglicht das gleichzeitige Mischen und Trennen von Proben durch Zentrifugen- und Mischmodule, die sich auf dem zentralen Spin-Modul befinden.

FV-2400 ist eine "offene" Zentrifuge (ohne Deckel). Dadurch wird die Geschwindigkeit der Zentrifugation und der Resuspension erhöht.

Die Drehzahl des Geräts hängt von der Frequenz des Stromnetzes ab:
2800 U/min bei 50 Hz, 3500 U/min bei 60 Hz.

Sechs verschiedene Rotoren sind für dieses Gerät erhältlich. Die Übersicht finden Sie auf Seite 2.


IQ und OQ Service ist auf Anfrage möglich.



FV-2400 Microspin

Technische Daten

Netzstrom	50 Hz	60 Hz
Rotationsgeschwindigkeit (fix)	2.800 U/min	3.500 U/min
Max. RCF	500 × g	700 × g
Dauerbetrieb und Impuls-Modus	ja	
Gesamtabmessung (B x T x H)	120 x 170 x 120 mm	
Gewicht	1.4 kg	
Betriebsspannung	230 V; 50/60 Hz	
Leistung	25 W (0.1 A)	
Artikelnummer	109.3040	

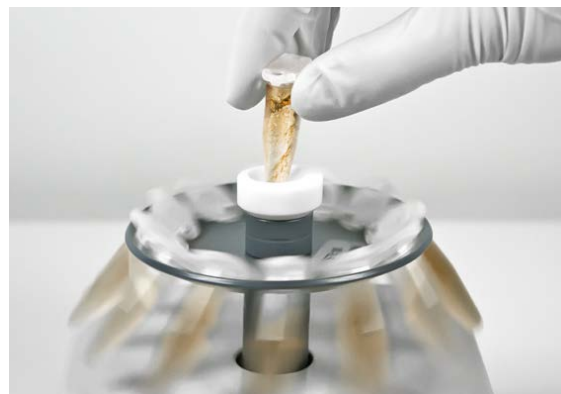

Vortex FV-2400

FV-2400 Microspin Minizentrifuge/Vortex



Erhältliche Rotoren

R-0.5/0.2M	R-1.5M	R-2/0.5	R-2/0.5/0.2
Standard Rotor	Standard Rotor	Optional	Optional
Anzahl Plätze: 24	Anzahl Plätze: 12	Anzahl Plätze: 16	Anzahl Plätze: 18
12 x 0.5 ml und 12 x 0.2 ml Mikrotubes	12 x 1.5 ml Mikrotubes	8 x 2/1.5 ml und 8 x 0.5 ml Mikrotubes	6 x 2 / 1.5 ml, 6 x 0.5 ml und 6 x 0.2 ml Mikrotubes

SR-16	SR-64
Optional	Optional
Anzahl Plätze: 16	Anzahl Plätze: 64
2 x 8 Plätze für 0.2 ml Strip-Tubes	8 x 8 Plätze für 0.2 ml Strip-Tubes für alle Strip-Tubes geeignet



Optionaler Rotor SR-64 für Strip-Tubes