

Minizentrifuge-Vortex - FVL-2400N

Beschreibung

Diese Combi-Spin Minizentrifuge erfüllt spezielle Anforderungen für PCR-Anwendungen. FVL-2400N ist einsetzbar in der Mikrobiologie, Biochemie und in biotechnologischen Bereichen.

Combi-Spin bietet gleichzeitiges Mischen und Separieren von Proben mithilfe von Zentrifugen- und Mischmodulen, die auf dem gemeinsamen Spin-Modul untergebracht sind.

FVL-2400N ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, der die Zentrifuge sofort stoppt, falls der Deckel geöffnet wird.



Mini-Zentrifuge FVL-2400N

Technische Daten

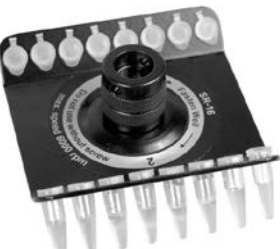
Rotationsgeschwindigkeit (fest)	Die Drehzahl des Gerätes ist abhängig von der Netzfrequenz. 2800 U/min (500 x g RCF) bei 50 Hz-Netzen, 3500 U/min (700 x g) bei 60 Hz-Netzen.
Dauerbetrieb und Impuls-Betrieb	ja
Sicherheit	stoppt bei geöffnetem Deckel
Gesamtabmessung (B x T x H)	190 x 235 x 125 mm
Gewicht	1.7 kg
Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	25 W (0.1 A)
Artikelnummer	109.3050

Minizentrifuge-Vortex FVL-2400N



Erhältliche Rotoren

R-0.5/0.2M	R-1.5M	R-2/0.5	R-2/0.5/0.2
			
Standard Rotor	Standard Rotor	Optional	Optional
Anzahl Plätze: 24	Anzahl Plätze: 12	Anzahl Plätze: 16	Anzahl Plätze: 18
12 x 0.5 ml und 12 x 0.2 ml Mikrotubes	12 x 1.5/2 ml Mikrotubes	8 x 2/1.5 ml und 8 x 0.5 ml Mikrotubes	6 x 2/1.5 ml, 6 x 0.5 ml und 6 x 0.2 ml Mikrotubes

SR-16	SR-32
	
Optional	Optional
Anzahl Plätze: 16	Anzahl Plätze: 32
2 x 8 Plätze für 0.2 ml Strip-Tubes	4 x 8 Plätze für 0.2 ml Strip-Tubes für alle Strip-Tubes geeignet *nicht mit Combi-Spins vor 2015 hergestellt kompatibel.